

# Achios- X Observer

## METALOGRAFIA

### LO MAS DESTACADO

- Oculares campo extra amplio EWF10x/22 mm, Ø 30 mm
- Revolver porta objetivos quintuple
- Iluminación Epi (reflejada) de campo claro y campo oscuro
- Nomarski DIC (opcional)
- Objetivos IOS Plan Semi-apocromaticos o plan apocromaticos
- Mandos de la platina ubicados en posición baja
- Control inteligente de la iluminación: Smart Light Control (SLC)
- Luz 3 W NeoLED™ con ajuste de temperatura de color
- 10 años de garantía

## ESPECIFICACIONES

### OCULARES

- Oculares EWF 10x/22 mm con ajuste de dioptrías, Ø 30 mm

### CABEZALES

- Cabezal tipo Siedentopf binocular o trinocular 30° de inclinación estándar. Se incluye un adaptador de montura C de 0,5x (el de 1x es opcional)
- Cabezal tipo Siedentopf trinocular (interruptor 100:0/0:100), 30° de inclinación
- Cabezal ergonómico tilting (0°-35°) (opcional). Se incluye un fototubo de 23,2 mm. Hay disponibles varios adaptadores de montura C (lentes opcionales)

### REVOLVER

- Revólver quintuple, montado sobre cojinetes de bolas y empuñadura para un mejor agarre
- Objetivos de rosca de 26 mm

### OBJETIVOS - CAMPO CLARO-CAMPO OSCURO

- Objetivos IOS Plan Semi-apocromáticos, corregidos al infinito
- Objetivos IOS Plan Apocromáticos, corregidos al infinito

| Plan Semi-Apo<br>(PL-SAMi) | 5x/0.15,<br>Ddt 20 mm | 10x/0.30,<br>Ddt 11 mm | 20x/0.45,<br>Ddt 3.1 mm |                       |                         |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Plan Apo<br>(PL-AMi)       |                       |                        |                         | 50x/0.80,<br>Ddt 1 mm | 100x/0.90,<br>Ddt 1 mm* |

\* Opcional

Todos los objetivos son parfocales IOS de 45mm y rosca de montaje M26 mm

Todas las ópticas tienen tratamiento antihongos y revestimiento antirreflejos para lograr el máximo rendimiento lumínico

### PLATINA

- Platina 238 x 140 mm sin cremallera, revestimiento endurecido con platina mecánica XY 78x54 mm
- Placas de vidrio y metálicas

### ENFOQUE

Enfoque macrométrico de 18 mm y micrométrico de 0,2 mm por rotación, con divisiones de 0,002 mm



● EAX-1053-APLMRi

EAX-1053-APLMRi  
EAX-1058-APLMRi




513 (h) x 255 (w) x 487 mm (d) | 15.6 kg  
586 (h) x 255 (w) x 487 mm (d) | 17.5 kg

## ILUMINACIÓN

- Equipado con iluminación NeoLED™ de 3 W e intensidad ajustable Episcopica (reflejada) y Diascopica (transmitida)
- Con fuente de alimentación externa de 100-240 V CA
- La iluminación episcopica incorpora una unidad giratoria para cambiar rápidamente de campo oscuro/campo claro reflejado y a campo claro transmitida

## CONTROL DE LUZ Y TEMPERATURA DE COLOR

Esta función inteligente memoriza el nivel de intensidad de la luz para cada objetivo. La temperatura de color de la fuente de luz NeoLED™ se puede ajustar y memorizar. Esta innovación no solo aumenta la comodidad, sino que también ahorra un tiempo valioso durante el trabajo. La fuente de luz NeoLED™ es ecológica y respetuosa con el medio ambiente y de larga duración. La función de descanso apaga la fuente de luz automáticamente después de un tiempo definido por el usuario

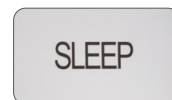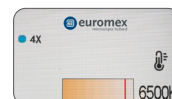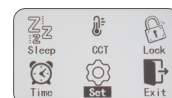

## NEOLED™



El innovador diseño NeoLED™ es una combinación de un LED personalizado y una lente delgada especialmente diseñada con una longitud focal corta para:

- Capturar más luz oblicua de la fuente de luz NeoLED™, lo que aumenta significativamente la salida de luz
- Requiere menos energía para lograr este nivel de intensidad de luz
- Producir imágenes con mayor resolución gracias a la mayor apertura del NeoLED™
- Lograr una vida útil mas larga, hasta 50.000 horas nominales, norma L70

## CONDENSADOR DE LARGA DISTANCIA DE TRABAJO

Condensador regulable en altura y de larga distancia de trabajo A.N. 0,65 con marcas de identificación numérica de apertura

## POLARIZACIÓN

El microscopio viene con un analizador y un polarizador, los cuales se insertan fácilmente en las ranuras de la iluminación reflejada

## CONTRASTE DE INTERFERENCIA DIFERENCIAL (DIC)\*

El módulo DIC capta las diferencias de altura de las estructuras, que normalmente no pueden visualizarse con la técnica de campo claro. Estas imágenes en relieve son ideales para inspecciones de superficies de placas eléctricas, pantallas LCD, etc.

\* Opcional

## CSS – ALMACENAMIENTO DEL CABLE

Permite guardar fácilmente el exceso de cable en la parte posterior del microscopio durante el funcionamiento, o enrollarlo y guardarlo fácilmente al finalizar el trabajo

## EMPUÑADURA DE TRANSPORTE

La empuñadura de transporte integrada en la parte posterior del microscopio garantiza un transporte seguro del mismo

## EMBALAJE


Se suministra con cable de alimentación, analizador, polarizador, funda antipolvo, fusible de repuesto, manual del usuario y herramienta universal



| MODELOS         | Trino | Cabezal Ergo | Oculares EWF 10x/22mm | Objetivos Plan Semi-Apo BD 5x/10x/20x | Objetivo Plan Apo BD 50x | Objetivo Plan Apo BD 100x | Iluminación Köhler 3W NeoLED™ transmitida | Iluminación Köhler 3W NeoLED™ reflejada | Contraste de Interferencia Diferencial (DIC) |
|-----------------|-------|--------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| EAX-1053-APLMRi | •     |              | •                     | •                                     | •                        | o                         | •                                         | •                                       | o                                            |
| EAX-1058-APLMRi |       | •            | •                     | •                                     | •                        | o                         | •                                         | •                                       | o                                            |

o = Opcional

## DIMENSIONES

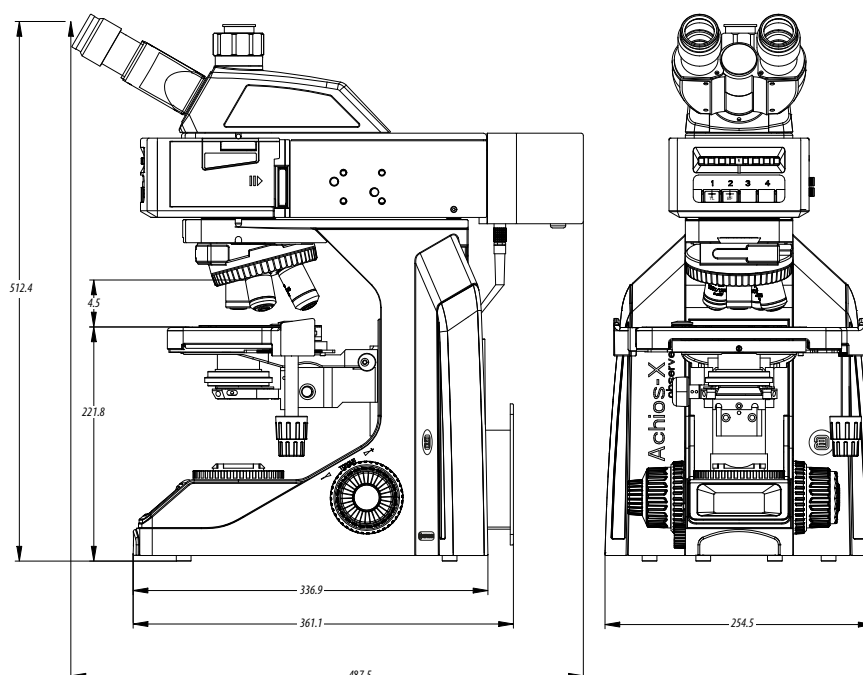

## ACCESORIOS

### OCULARES (PARA TUBOS DE Ø 30 MM)

**EAX-6010** Ocular EWF 10x/22 mm. Con ajuste de dioptrías

### OBJETIVOS CAMPO CLARO Y CAMPO OSCURO

*Plan Semi-Apocromático PL-SAMi corregido al infinito,  
IOS 45 mm parfocal\**

**EAX-8105** Objetivo 5x/0.15 PL-SAMi BD. Ddt 20 mm

**EAX-8110** Objetivo 10x/0.30 PL-SAMi BD. Ddt 11 mm

**EAX-8120** Objetivo 20x/0.45 PL-SAMi BD. Ddt 3.1 mm

*Plan Apocromático PL-AMi corregido al infinito, IOS 45 mm parfocal\**

**EAX-8150** Objetivo 50x/0.5 PL-AMi BD. Ddt 10.6 mm

**EAX-8100** Objetivo 100x/0.8 PL-AMi BD. Ddt 3.5 mm

*Ddt = Distancia de Trabajo*

*BD = Campo claro/Campo oscuro*

*\*Rosca M26, sin corrección de cubreobjetos*

### CABEZALES

**EAX-5700-ADD** Cabezal Siedentopf trinocular ergonómico con tubos inclinables. Solo con la compra de microscopios nuevos. Solicite el microscopio como: EAX-1058- APLMRI

### ADAPTADORES FOTOGRÁFICOS PARA LOS MODELOS AX.xxx3

**EAX-9850** Adaptador montura-C 0,5x (incluido estándar)

**EAX-9810-ADD** Adaptador montura-C 1x

### ADAPTADORES FOTOGRÁFICOS PARA LOS MODELOS xxx8

**EDX-9810** Montura-C de 1x aumentos, para cámaras rosca-C

**EDX-9835** Montura-C con objetivo de alta resolución 0.35x para cámaras rosca-C y sensor de 1/3"

**EDX-9850** Montura-C con objetivo de alta resolución 0.50x para cámaras rosca-C y sensor de 1/2"

**EDX-9863** Montura-C con objetivo de alta resolución 0.63x para cámaras rosca-C y sensor de 2/3"

**EAE-5130** Adaptador universal SLR con lente de proyección 2x para tubo trinocular de 23,2 mm. de diámetro. Requiere anillo T2

**EAE-5025** Anillo T2 para cámara digital SLR NIKON D

**EAE-5040** Anillo T2 para cámara digital SLR CANON EOS

### MISCELANEA

**EAX-9696** Accesorio DIC

**EAX-9660** Set de polarización simple (para luz transmitida)

**EAX-9600-R** Corredera con filtro de polarización, posición fija, (se suministra con la iluminación reflejada)

**EAX-9609-R** Corredera con filtro analizador, giratorio 360° (se suministra con la iluminación reflejada)



● EAX-5700-ADD



● EAX-9696



● EAX-9660