

BioBlue

POINTS ESSENTIELS

- · Oculaire(s) EWF10x/18mm
- Modèles BB EVO avec oculaires WF 10x / 20 mm et éclairage de Köhler NeoLED ™
- Modèles avec caméra CMOS 5,0 MP intégrée
- Modèles avec écran LCD 7"
- Modèles pour les applications de polarisation
- · Traitement antibactérienne (APL)
- · Révolver inversé pour 4 objectifs semi plan
- · Platine mécanique X-Y intégrée
- · Mise au point macro-micrométrique coaxial
- Condenseur d'Abbe réglable avec diaphragme à iris et porte filtre
- Modèles monoculaires avec éclairage LED de 1 W
- Modèles bino et trinoculaires avec éclairage NeoLED™ de 1W pour un éclairage optimal
- Modèles LED avec batteries rechargeables et transformateur interne
- · Statif ergonomique
- Garantie de 10 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OCULAIRE(S)

- Oculaire grand champ WF10x/18mm
- Sécurisé avec pointeur pour les modèles monoculaires
- Les modèles BioBlue EVO sont livrés avec des oculaires WF 10x / 20 mm

TÊTE

- Toutes les têtes sont rotatives sur 360° et sécurisées par une vis
- Les modèles monoculaires ont des tubes inclinés à 45°
- Les modèles binoculaires et trinoculaires ont des tubes inclinés à 30°, distance interpupillaire réglable entre 48 et 75 mm et réglage de la dioptrie de ± 5 sur le tube gauche
- La tête trinoculaire est dotée d'un séparateur de faisceaux (50:50) et génère une image non-inversée
- Les modèles avec caméra USB-2 intégrée sont dotés d'un capteur CMOS 1/2" de 5,0 MP et une résolution de 2560 x 1920
- Modèles avec écran IPS LCD 7"
- Les microscopes BioBlue peuvent aussi être livrés avec une tête à discussion



MONOCULAR MODEL BB.4200

320 (h) x 176 (w) x 227 mm (d) | 3.0 kg

BINOCULAR MODEL BB.4260

360 (h) x 176 (w) x 227 mm (d) | 4.0 kg

POLARIZATION MODEL BB.4200-P-HLED

360 (h) x 176 (w) x 227 mm (d) | 4.4 kg

TOURELLE

Tourelle inversé quadruple montée sur des roulements à billes. Les modèles de polarisation sont livrés avec un analyseur escamotable







Tête trinoculaire









Tête numérique mono

Tête numérique bino

Tête numérique LCD

Tête monoculaire

Tête binoculaire

Tête à discussion



OBJECTIFS - 45 MM PARFOCAUX

- Livrés avec des semi-plan 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65, S60x/0.85, S100x/1.25 à immersion d'huile, configuration selon le modèle
- Les objectifs S40x, S60x et S100x à immersion d'huile sont tous rétractables pour éviter des dommages aux objectifs ou à la préparation

Toutes les optiques sont traitées antifongique et antireflet pour un meilleur passage de la lumière

MISE AU POINT

- Macro-micrométrique coaxiale, 200 graduations, précision de 2 µm par graduation, 0.4 mm par rotation
- · Déplacement total d'environ 23 mm
- Butée de protection réglable pour éviter d'endommager l'échantillon et les obiectifs
- Le réglage macrométrique est équipé d'un contrôle de friction

PLATINE

- Platine de 130 x 130 mm avec platine mécanique X-Y de 70 x 28 mm sauf pour les modèles BB.4200 et BB.4205
- Ces modèles ont une platine de 120 x 120 mm avec des valets de fixation non amovible
- Les modèles de polarisation sont fournis avec une platine de Ø 129 mm, et rotative sur 360° avec 2 valets de fixation

MODÈLES POUR LA POLARISATION

- Equipés d'un filtre analyseur monté dans sa glissière et positionné sous la tête
- Filtre de polarisation rotatif sur 360°, gradué et positionné sur le collecteur de l'éclairage
- Les modèles pour la polarisation sont livrés avec un éclairage H-LED pour un rendu des couleurs correct (très similaire au spectre lumineux halogène) et avec alimentation 100-240 Vac intégrée
- Pour les modèles standard, des dispositifs de polarisation dont également disponibles

CONDENSEUR

Condenseur d'Abbe O.N 1.25 réglable en hauteur avec diaphragme à iris et support de filtre

ECLAIRAGE NeoLED

- Les modèles binoculaires et trinoculaires sont dotés d'un éclairage
 NeoLED™ de 1 W réglable qui augmente la puissance de l'éclairage
- Les modèles monoculaires sont livrés avec un LED de 1 W réglable
- Les modèles de polarisation sont livrés avec un éclairage H-LED pour un rendu des couleurs correct (très similaire au spectre lumineux halogène) et une alimentation 100-240 V intégrée. Cependant, un éclairage halogène de 20 W est également disponible pour les modèles de polarisation sur demande spéciale
- Les modèles EVO sont dotés d'un éclairage Köhler NeoLED™
- Tous les microscopes BioBlue excepté les modèles halogènes sont dotés de batteries AA rechargeables et d'une alimentation interne pour une utilisation sans fil. Les versions LCD ne fonctionnent pas avec des piles

FENTE ANTI-VOL

A l'arrière du microscope se trouve une fente de sécurité Kensington, qui peut être utilisée pour sécuriser l'appareil contre le vol

EMBALLAGE

- Livré avec un câble d'alimentation, trois piles AA rechargeables, une housse de protection, un fusible de rechange, filtre blanc, un manuel d'utilisation et 5 ml d'huile à immersion pour les modèles ayant un objectif \$100x
- Les modèles pour la polarisation sont livrés avec un oculaire avec un réticule en croix pour le centrage
- · Le tout dans un coffret en polystyrène



APL (TRAITEMENT ANTIMICROBIEN)

Utilisant la même technologie déjà largement utilisée dans le domaine de la santé pour les revêtements muraux, les systèmes d'éclairages des patients, les systèmes de pressurisation et d'aspiration, le TAM empêche la croissance de microbes indésirables qui peuvent causer la dégradation, la décoloration des microscopes Euromex ou être source de mauvaises odeurs





MODÈLES NUMÉRIQUES

CAMÉRA

- Tous les microscopes numériques BioBlue sont équipé d'une caméra intégrée CMOS USB.2 de 5,0 MP
- Résolution maximale de 2560 x 1920, rendue des couleurs de 24 bits, jusqu'à 30 images par seconde
- Livré avec le logiciel ImageFocus Plus, un câble USB-2 et une lame d'étalonnage avec micromètre de 1mm/100
- La garantie des caméras est de 2 ans

• LOGICIEL

- Le logiciel ImageFocus Plus permet de sauvegarder des images sous format .jpg, .tif, bmp ou dicom tout comme des vidéos sous format .avi
- Des annotations et des mesures peuvent être faites en direct ou sur des images capturées
- Compatible avec Windows 10 et supérieure, les deux en 32 et 64 bits
- Un version pour Mac OS est aussi disponible
- Les actualisations peuvent être téléchargées directement sur notre site web **www.euromex.com**

MODÈLES AVEC ÉCRAN LCD

- Écran LCD IPS 7"
- Résolution d'écran 1920 x 1080 @ 30 ips
- Enregistre des images et des vidéos directement sur une carte micro SD
- Résolution d'image jusqu'à 1844 x 1080 au format JPEG
- Résolution vidéo 1280 x 720 Format AVI
- Fonction de mesure de base (ligne) avec étalonnage.
 Lame d'étalonnage disponible en option
- La garantie de l'écran est de deux ans





MODÈLES	Mono	Bino	Trino	SMP objectifs 4/10/40x	SMP objectif S60	SMP objectif S100x	Platine mécanique X-Y	LED	NeoLED™	Éclairage de Köhler ⁽¹⁾	Polarisation ⁽²⁾
BB.4200	•			•				•			
BB.4220	•			•			•	•			
BB.4240	•			•	•		•	•			
BB.4250	•			•		•	•	•			
BB.4260		•		•		•	•		•		
BB.4260-E		•		•		•	•		•	•	
BB.4263		•		•	•		•		•		
BB.4243			•	•	•		•		•		
BB.4253			•	•		•	•		•		
BB.4253-E			•			•					
BB.4220-P-HLED	•			•				•			•
BB.4240-P-HLED	•			•	•			•			
BB.4250-P-HLED	•			•							•
BB.4261-P-HLED		•		•					•		•
BB.4263-P-HLED		•		•	•				•		•
BB.4260-P-HLED		•		•					•		•
BB.4241-P-HLED			•	•					•		•
BB.4243-P-HLED			•	•	•				•		•
BB.4253-P-HLED			•	•		•			•		•

⁽¹⁾ Les modèles EVO sont livrés avec des oculaires WF 10x/20 mm et un éclairage Köhler NeoLED (tm)

MODÈLES NUMÉRIQUES

MODÈLES	Mono	Bino	LCD*	SMP objectifs 4/10/40x	SMP objectif S60	SMP objectif S100x	Platine mécanique X-Y	LED	NeoLED™	poids (kg)
BB.4205	•			•				•		2,9
BB.4225	•			•			•	•		3,4
BB.4245	•			•	•		•	•		3,4
BB.4255	•			•		•	•	•		3,4
BB.4267		•		•		•	•		•	4,1
BB.4269		•		•	•		•		•	4,1
BB.4200-LCD			•	•				•		2,9
BB.4220-LCD			•	•				•		3,4

^{*} Modèles avec écran LCD 7", 1920x1080 pixels, carte SD pour images et vidéo. Les versions LCD ne fonctionnent pas avec des piles

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

OCULAIRES

AE.5571	Oculaire de grand champ WF 5x/18 mm
AE.5572	Oculaire grand champ WF 10x/18 mm
AE.5572-E	Oculaire grand champ WF 10x/20 mm pour BB EVO
AE.5573	Oculaire grand champ WF 15x/12 mm
AE.5573-E	Oculaire grand champ WF 15x/12 mm pour BB EVO
AE.5574	Oculaire grand champ micrométrique 10 mm/100
AE.5581	Oculaire grand champ WF 10x/18 mm avec pointeur
AE.5581-E	Oculaire grand champ WF 10x/20 mm pour BB EVO
AE.5582	Oculaire grand champ WF 20x/11,5mm
AE.5582-E	Oculaire grand champ WF 15x/12,5 mm pour BB EVO
AE.5365	Œilleton pour oculaires de 28 mm
AE.5365-E	Paire d'oeilletons pour oculaires pour BB EVO

OBJECTIFS

Semi Plan SMP, 45 mm parfocaux

AE.5591	4x/0,10 SMP objectif. Ddt 37,5 mm
AE.5593	10x/0,25 SMP objectif. Ddt 6,54 mm
AE.5594	20x/0,40 SMP objectif. Ddt 1,2 mm
AE.5597	S40x/0,65 SMP objectif. Ddt 0,68 mm
AE.5599	S60x/0,75 SMP objectif. Ddt 0,2 mm
AE.5601	S100x/1,25 SMP objectif. Ddt 0,22 mm

Ddt = Distance de travaille

⁽²⁾ Les modèles de polarisation sont livrés avec un éclairage H-LED - spectre lumineux très similaire à celui d'un éclairage halogène - et un oculaire avec réticule pour le centrage. Un éclairage halogène de 20 W est également disponible pour les modèles de polarisation sur demande spéciale



DIVERS

AE.1110 Lame micrométrique 1mm/100 parties

AE.5511 Tête à discussion sans oculaires. Livrée avec deux oculaires lorsque

la tête est commandée montée sur le microscope

AE.5202 Filtre bleu, diamètre 32 mm AE.5203 Filtre jaune, diamètre 32 mm AE.5204 Filtre neutre gris, diamètre 32 mm

AE.5205 Filtre vert, diamètre 32mm AE.5207 Filtre bleu, diamètre 32mm

BB.4300 Coffret de transport en aluminium pour BioBlue AE.9918 Valise en nylon pour microscope (25 x 39 x 19 cm) AE.9912 Euromex housse de protection, moyenne (35 x 39 cm)

BB.9602 Filtre analyseur monté dans sa glissière

AE.9981 LED de 1 W de rechange

AE.9981-H LED de 1 W (type couleur halogène) de rechange (uniquement pour

les versions monoculaires)

AE.9991 NeoLED™ de 1 W de rechange

AE.9991-H NeoLED™ de 1 W de rechange (uniquement pour les versions

binoculaires et trinoculaires)

Sampoule halogène 20 W 12 V de rechange pour SL.1379

les BioBlues polarisants

AE.5227 Fusibles de rechange 1 A 250 V, 10 unités

ACCESSOIRES DE CAMÉRA

Adaptateur SLR avec lentille 2x, pour tubes de 23,2 mm. AE.5130

Nécessite une bague T2

AE.5025 Baque T2 pour appareil photo SLR Nikon D AE.5040 Bague T2 pour appareil photo SLR Canon EOS

CONSOMMABLES

PB.5155 Lames de 76x26 mm, bords polis, 50 pièces PB.5165 Couvre-lames 18x18 mm, 0,13-0,17 mm, 100 pièces PB.5168 Couvre-lames 22x22 mm, 0,13-0,17 mm, 100 pièces PB.5245 Papier optique, paquet de 100 feuilles

Burette de 25 ml d'huile à immersion, n=1.515 PB.5255

PB.5274 Alcool isopropyle 99% (200 ml)

PB.5275 Kit de nettoyage optique: liquide de nettoyage optique,

tissus doux, brosse, poire à air, coton tiges





● PB.5155





PB.5255



PB.5275









DISPOSITIFS DE POLARISATION

Ne convient pas pour les modèles BioBlue EVO

AE.5150 Dispositif de polarisation simple, composé de: Polariseur Ø 18 mm à monter dans l'oculaire Analyseur Ø 32 mm à placer dans le porte filtre

AE.5151 Dispositif de polarisation simple, composé de: Polariseur Ø 18 mm à monter autour l'oculaire. Analyseur Ø 32 mm à placer dans le porte

AE.5152 Dispositif de polarisation simple, composé de: Polariseur à monter autour de l'oculaire Analyseur Ø 32 mm à placer dans le porte filtre

AE.5154 Filtre de polarisation, monté dans une bague, à placer autour d'un oculaire

AE.5155 Dispositif de polarisation avec analyseur sur glissière, Platine rotative à monter sur platine X-Y. Polariseur à placer sur le porte lampe


AE.5155-P Dispositif de polarisation avec analyseur sur glissière, Platine rotative à monter sur platine avec valets. Filtre de polarisation à placer sur le collecteur de l'éclairage

AE.5156 Dispositif de polarisation simple composé de : Analyseur monté sur glissière.


Filtre de polarisation à placer sur le collecteur de l'éclairage

AE.5158 Dispositif de polarisation avec analyseur sur glissière et une petite platine rotative (75 x 50 mm) à monter sur la platine avec deux valets. Filtre de polarisation rotative sur 360° à placer sur le collecteur de l'éclairage

AE.5158-P Dispositif de polarisation avec analyseur sur glissière et une platine rotative (100 x 65 mm) à monter sur la platine avec deux valets. Filtre de polarisation rotative sur 360° à placer sur le collecteur de l'éclairage

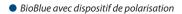



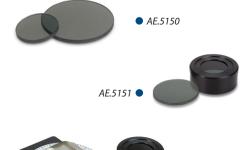







AF.5158-P





